

ハンディボディリフレ


RLC-HR2000

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

同梱品

本製品には下記のものと同梱されています。不足やはじめから破損している場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

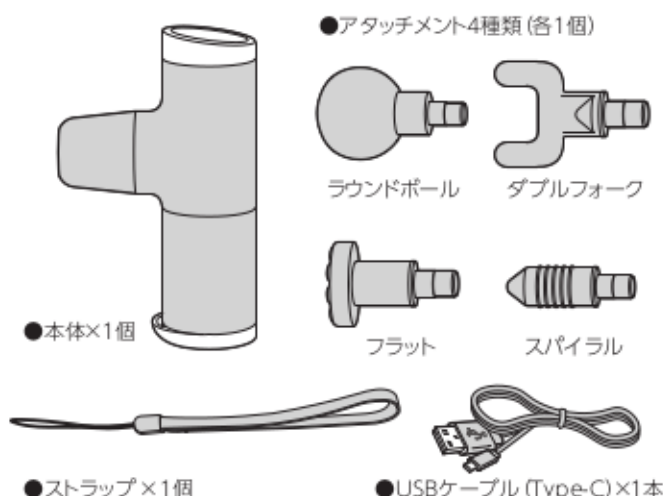

製品仕様

電 源	入力 5V/1A USB Type-C
内 蔵 バッテリー	リチウムイオン充電電池 7.4V 2,000mAh
動 作 時 間	満充電状態で約1時間（振動の強さによる）
運 転 モード	強弱4段階
1 回 の 運 転 時 間	15分で自動停止
動 作 環 境 温 度	0℃～40℃
本 体 材 質	本体（シルバー）、アタッチメント：ABS ラウンドボール ポール部分：PP
本 体 重 量	約35.5g（アタッチメント含まず）
本 体 サ イ ズ	約45（幅）×95（奥行）×140（高さ）mm （アタッチメント含まず）

充電方法

本製品は充電が完了してから使用してください。

※充電しながらの使用はできません。

本体下部の充電端子にUSBケーブルを差し込み、USBアダプタ（5V 1A以上のものをご使用ください。0.5A、USB PD充電器は使用できません。）と接続してください。その後、USBアダプタをコンセントに差し込むと充電が開始されます。



電池残量がない状態から充電完了までの目安は約3時間です。

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

- ぬれた手でUSBアダプタ、ケーブル、充電端子に触れないでください。また、水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の危険があります。
※また、本製品は撥水加工はしていません。
- 充電には規格にあったUSBアダプタ、ケーブルを使用してください。規格以外の機器を使用すると故障の原因となります。
- 本製品はバッテリーを内蔵しています。火中へ投げたり、直射日光のあたる場所や火気のそばに放置しないでください。発火や爆発の危険があります。
- 廃棄する場合は自治体の定める方法に従い、適切に処理してください。異臭や異常な発熱、発煙・発火などがあった場合はただちに使用を中止してください。
- ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。本製品は成人用です。お子様には使用させないでください。また、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 製品を分解・改造しないでください。故障の際はご自分で修理をせずに、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- バッテリーは消耗品です。使用時間が明らかに短くなったり、異常な発熱、膨張するなど変化が見られた場合は以後の使用を中止してください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。


- 本製品は振動により筋肉に刺激をあたえ、リラックスを促す目的の製品です。病気の治療には使用できません。目的外の使用は避けてください。
- 【使用に関するご注意】
- 一部分へ連続して使用しないでください。筋肉や関節に悪影響を与える恐れがあります。
※運転開始から15分で自動停止します。
- 下記に該当する方は健康に悪影響を与える恐れがあるので使用を控えてください。また、下記の該当しない方でも病気治療中の方は医師と相談のうえご使用ください。
 - 小児の方 ●妊娠中の方 ●高齢の方 ●発熱中の方
 - 飲酒中の方 ●糖尿病などで知覚・痛覚に障害のある方
 - ペースメーカーを使用中の方
 - 医師からマッサージを禁止されている方
- 下記に部位へ本機を使用すると悪影響を与える場合があるので、使用を控えてください。
 - 頭部（顔面含む） ●関節部分 ●傷のある部分
 - 骨折・肉離れなど疾患のある部分
 - その他、使用すると強い痛み、不快感を覚える場所

本製品を使用した結果、いかなる損害が生じても、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

使用方法

●電源ON/OFFするには

電源ボタンを3秒間長押しすると電源がONになります。
振動の強さは4段階で調整することができ、電源ボタンを短く押すごとに切り替わります。
振動の強さは電源ボタン上のランプで確認できます。
1回の運転時間は15分間で、自動的に電源はOFFになります。
運転中に手で電源をOFFにするには、電源ボタンを3秒間長押しします。

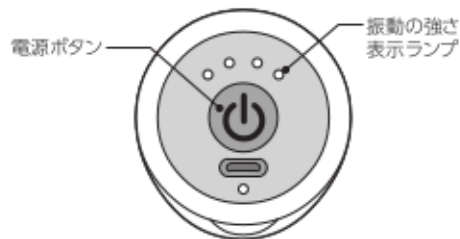


●使い方




ストラップを手首に通し、片手でしっかりと本体を握ります。
最初は一番弱い振動の強さで体にあて、振動が心地よいと感じる強さに徐々に調節してください。



●アタッチメントの交換

本製品には4つのアタッチメントが付属しています。使用する部位やお好みにあわせてご使用ください。
取り外すには、本体をしっかりと持ち、アタッチメントをまっすぐ引き抜きます。その後、取り付けたいアタッチメントをまっすぐに押し込んでください。

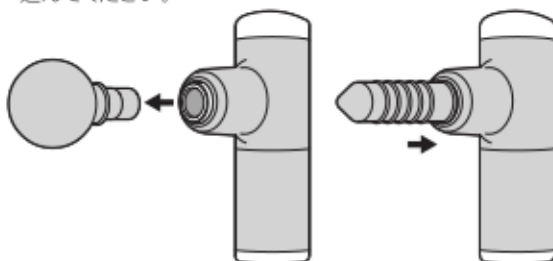

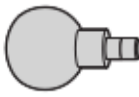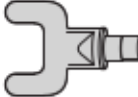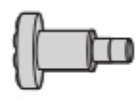	
腰・背中・大腿部・肩など	脊椎周辺、ふくらはぎなど
	
全身広範囲に	手のひら・足の裏など

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。
一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。
※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。
※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名

ハンディボディリフレ RLC-HR2000

保証期間(お買い上げ日より)

本体 6カ月間

(保証規定)

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
当社はアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の利益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から6ヵ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申し付けください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)
- ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

- ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ※本書の提示がない場合。
- ※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～17:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く