

アイキュア


RLC-ER1000 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

製品仕様


電 源	入力 5V/1A
消 費 電 力	4.5W
内 蔵 バッテリー	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,000mAh
動 作 時 間	満充電状態で約1時間
運 転 モード	3種類 (1回あたりの運転時間10分)
体 感 温 度	約42℃±1℃
動 作 環 境 温 度	0℃～45℃
本 体 材 質	本体筐体(白色): ABS、アイマスク側(グレー): PU
本 体 重 量	約290g
本 体 サ イ ズ	約225(幅)×85(奥行)×110(高さ)mm

同梱品・各部名称

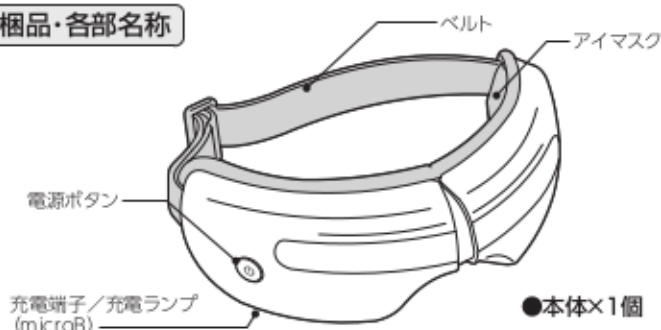

●本体×1個

本製品には本体、USBケーブルが同梱されています。不足していたり、はじめから破損している場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

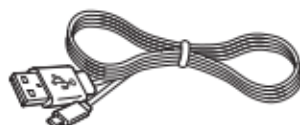

●USBケーブル×1本

充電方法

本製品は充電が完了してから使用してください。

※充電しながらの使用はできません。

電源ボタン下部の充電端子にUSBケーブルを差し込み、USBアダプタ(5V 2A以下のものをご用意ください)と接続してください。その後、USBアダプタをコンセントに差し込むと充電が開始されます。

充電の状態は充電端子横のランプの色で確認できます。

電池残量がない状態から充電完了までの目安は約2～3時間です。



安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



ぬれた手でUSBアダプタ、ケーブル、充電端子に触れないでください。また、本製品に水や液体をかけないでください。感電や故障の危険があります。



充電には規格にあったUSBアダプタ、ケーブルを使用してください。規格以外の機器を使用すると故障の原因となります。



本製品はバッテリーを内蔵しています。火中へ投げたり、直射日光のあたる場所や火気のそばに放置しないでください。発火や爆発の危険があります。廃棄する場合は自治体の定める方法に従い、適切に処理してください。



異臭や異常な発熱、発煙・発火などがあった場合はただちに使用を中止してください。



水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の危険があります。



ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。



製品を分解・改造しないでください。故障の際はご自分で修理をせずに、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



本製品を使用した結果、いかなる損害が生じて、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。



本製品は成人用です。お子様には使用させないでください。また、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



バッテリーは消耗品です。使用時間が明らかに短くなったり、異常な発熱、膨張するなど変化が見られた場合は以後の使用を中止してください。

【使用に関するご注意】



下記に該当する場合は使用を中止してください。

- まぶたや目、その周辺に炎症や傷・疾患がある場合
- アレルギー体質の人、皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
- 妊娠中の人

上記に該当しない場合でも、使用中に痛みやかゆみなど異常を感じた場合は使用を中止してください。



コンタクトを装着したまま使用しないでください。



眼球そのものに圧力がかけられないよう、本製品の装着位置やベルトの長さを調節してご使用ください。眼球に強い力がかけると視力に障害を負う危険があります。



本製品を使用中に眠気を催す場合がありますので、使用に際しては、仰向けになるか、ソファなどにもたれた状態で使用してください。また睡眠中は本製品を外してください。

装着方法



ベルトの長さを調節し、かぶるように装着します。



圧迫部分



本製品は運転時、空気圧により眼部周辺を圧迫します。眼球に強い圧力がかからないよう、本体の位置やベルトの長さを調節してください。

使用方法

●電源ON/OFFするには

電源ボタンを2秒間長押しすると電源がONになり、オートモードで運転が開始されます。運転時間は10分間で、10分経過すると自動的に電源はOFFになります。

運転中に手動で電源をOFFにするには、電源ボタンを2秒間長押しします。

●運転モードについて

本製品には3つの運転モードがあります。各モードは電源ボタンを短く押すごとに切り替わります。



●BGMを消すには

電源ボタンをすばやく2回続けて押すとBGMを消すことができます。

●使用後のお手入れ

アイマスク部分に汗や汚れが付着した場合は、乾いた清潔な布、またはウェットティッシュ(アルコールを含まないもの)などで拭き取り、よく乾燥させてから収納してください。水洗いはできませんのでご注意ください。

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめてから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼される時

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名	アイキュア RLC-ER1000
保証期間(お買い上げ日より)	本体 6カ月間

(保証規定)

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の利益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から6カ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申し付けください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)
- ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～17:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く